

Dental LED Light Series

LEDライトで口腔内を明るく照射

コード付きライト

21,000Luxで、口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。



デンタルLED UL スポットライト
マルチタイプ

価格 **36,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2K10104100347



デンタルLED UL スポットライト
TTLタイプ

価格 **36,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2K10104100347

【構成品】



- ライト ●バッテリーバック
- ACアダプター ●バッテリーバック用ケース(ベルトホルダー付) ●コードクリップ 4個
- クリップオン ●電光ライトキャップ 1個

【仕様】

バッテリーバックサイズ	W66.5xD13xH82mm
充電時間	約6時間(フル充電)
使用時間	約5時間
バッテリー寿命	約300回充電
色温度	約6,000K
照度	21,000LUX以上
調光	8段階
重量	LEDライトコード 36g バッテリーバック 112g

コードレスライト

コードレスでコードに絡まることなく、スムーズな診療をサポートします。



デンタルLED
コードレスヘッドライトⅢ

価格 **64,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2K10104100378

【構成品】



- コードレスヘッドライトⅢ
- バッテリーコントローラーⅢ×2
- 遮光ライトフィルター ●充電用コード
- ACアダプター ●クリップオンTTL用
- マイナスイオン

【仕様】

充電時間	約120分
照射時間	約150分
色温度	6,000K
照度	10,000Lux
LED寿命	約10,000時間
重量	37g(バッテリー装着時)
充電可能回数	約300回

オプション【専用クリップ】



クリップオン
TTL用
価格 **1,300**円



クリップオン
価格 **1,200**円

ライト用アタッチメント
SurgiTel
価格 **5,000**円

ライト用アタッチメント
EyeMag PRO
価格 **10,000**円

ライト用アタッチメント
EyeMag Smart
価格 **10,000**円

別売品価格表

製品名	価格
ガリレアンルーペULマルチ用フレーム Black/Red/Pink	各12,000円
ガリレアンルーペULマルチ用プロテクトアイグラス 2枚	1,200円
ガリレアンルーペULマルチ用フレームアーム(2個)	2,200円
ガリレアンルーペULマルチ用ノーズパッド	300円
ガリレアンルーペULマルチ用ブラックスポンジ	400円
ガリレアンルーペULマルチ用レンズキャップ(2個)	2,400円
ガリレアンルーペULマルチ用フレームバンド	1,200円
ガリレアンルーペ用アップリケドル	900円
ガリレアンルーペULコードクリップ(4個)	600円
ガリレアンルーペULマルチTTL用フレーム Black/Red/Pink	各12,000円
ガリレアンルーペULマルチTTL用プロテクトアイグラス L,R,S,SS(2枚)	各1,400円
ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ2.5倍	2,400円
ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ3.0倍	2,400円
デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ	18,000円
デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ TTLタイプ	18,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライト(バッテリー)バック	14,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライト用(バッテリー)バックケース	2,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライトACアダプター	1,800円
デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ バッテリーコントローラーⅢ	17,000円

関連製品

弱酸性次亜塩素酸クリーナー
JDSルーペ専用
除菌クリーナー



価格:2,000円
内容量:100cc

レンズくもり止め
OTSアンチ
フォグアルファ



価格:700円
内容量:10g

ガリレアンルーペ
フェイスシールド



価格:各3,500円(10枚入り)

- ・ULマルチ用
- ・UL TTL用
- ・マルチ用
- ・TTL用

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6543-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

双眼ルーペ

Galilean Loupes UL

[ガリレアン ルーペ UL]

超軽量
51g

※ガリレアンルーペUL マルチ
TTLタイプの場合

ウルトラライト、さらなる進化へ。

術者のニーズに応え、軽量化、快適な装着感、

そして明るく視野を実現。

ガリレアンルーペは、


さらなる進化へ。



フレームカラー
ピンク
新発売!
[2025.2.21]

Galilean Loupes UL Multi

Galilean Loupes UL Multi TTL

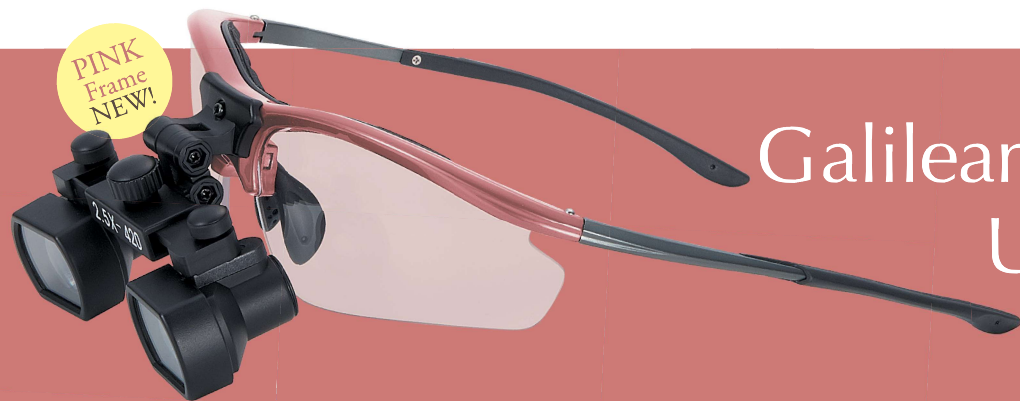


低価格で高機能、
双眼ルーペの
スタンダードタイプ

Galilean Loupes UL Multi Type

〈ルーペ仕様〉

倍率	焦点距離	焦点深度	視野径
2.5倍	420mm	80mm	80mm
3.0倍	420mm	70mm	70mm

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ

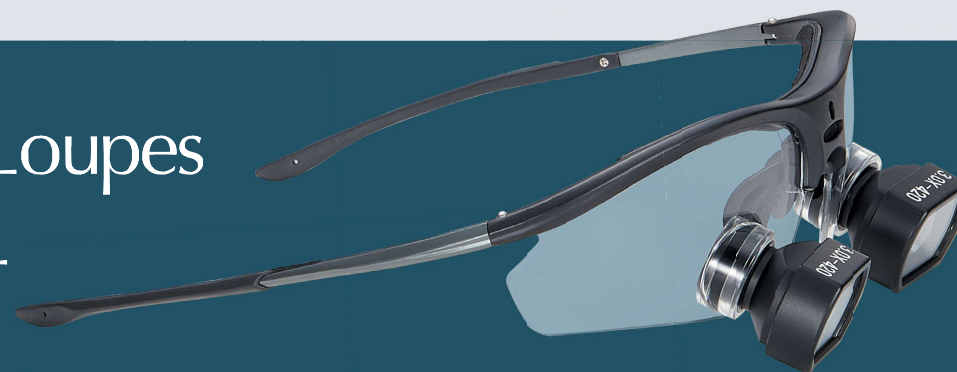

Galilean Loupes UL Multi TTL Type

プロテクトアイグラスに
レンズを直接装着
したTTLタイプ

〈ルーペ仕様〉

倍率	焦点距離	焦点深度	視野径
2.5倍	420mm	90mm	105mm
3.0倍	420mm	70mm	100mm

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ

Features of Multi

■メガネの上から装着可能

プロテクトアイグラスを外すことで、メガネをおかけの方でも
装着が可能になります。
また、メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用す
ることもできます。



Common Features

■超軽量設計

従来モデルより

約35%の軽量化を実現。

	マルチ		TTL	
	2.5倍	3.0倍	2.5倍	3.0倍
従来モデル	93g	93g	89g	89g
ガリレアンルーベUL	61g	65g	51g	54g

■フレキシブルフレーム

丈夫で軽量の眼鏡フレーム素材のTR90とマグネシウム合金の
コンビネーションフレームを採用しており、どなたにもベスト
なアングルで柔軟にフィットします。軽量化によりサポート力も
アップし疲労も大幅に軽減します。



■広い視野径が 得られるTTLタイプ

TTLタイプはマルチタイプと比べレンズと目の距離が近く
なるので、広い視野径が得られます。

■選べる瞳孔間距離

L、R、S、SSの瞳孔間距離の異なる4サイズのプロテクト
アイグラスがセットされており、術者に適した
サイズをお選びいただけます。

〈瞳孔間距離〉			
SS	56mm±1mm	R	60mm±1mm
S	58mm±1mm	L	64mm±1mm



単品

ガリレアンルーベUL マルチ

- Black (2.5倍 / 3.0倍)
- Red (2.5倍 / 3.0倍)
- Pink (2.5倍 / 3.0倍)



価格 38,000 円

- 構成品
- マルチ用フレーム本体 (Black / Red / Pink)
 - フレームバンド
 - レンズキャップ2個
 - フリップハンドル1個
 - 清掃布1枚
 - ドライバー1本
 - ルーペ袋
 - 専用ケース

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100345

コード付きライトセット

ガリレアンルーベUL マルチセット

「ガリレアンルーベUL マルチ」と
「デンタルLED UL スポットライト」
のセットです。



価格 66,000 円

セットで 8,000 円お得!!

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100348

コードレスライトセット

ガリレアンルーベUL マルチコードレスヘッドライトセットⅢ

「ガリレアンルーベUL マルチ」と
「デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ」
のセットです。



価格 94,000 円

セットで 8,000 円お得!!

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100370

単品

ガリレアンルーベUL マルチTTLタイプ

- Black (2.5倍 / 3.0倍)
- Red (2.5倍 / 3.0倍)
- Pink (2.5倍 / 3.0倍)



価格 50,000 円

- 構成品
- TTL用フレーム本体 (Black / Red / Pink)
 - プロテクトアイグラス (L、R、S、SS)
 - フレームバンド
 - レンズキャップ
 - ルーペ袋
 - 清掃布
 - 専用ケース

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100346

コード付きライトセット

ガリレアンルーベUL マルチTTLタイプセット

「ガリレアンルーベUL マルチ TTLタイプ」と
「デンタルLED UL スポットライト TTLタイプ」
のセットです。



価格 78,000 円

セットで 8,000 円お得!!

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100349

コードレスライトセット

ガリレアンルーベUL TTLコードレスヘッドライトセットⅢ

「ガリレアンルーベUL マルチ TTLタイプ」と
「デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ」
のセットです。



価格 100,000 円

セットで 14,000 円お得!!

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100380