

DB カリエスハンター

デンタルバンク カリエスハンター



クリニック・ご家庭で手軽に
虫歯や、みがき残しを発見できます。
衛生士への必需品



虫歯発見

プラーク発見

本体1年保証

DB カリエスハンター

¥45,000 (税別)

- ハンドピース (本体)
- ライトガイドロッド 90°
- ライトガイドロッド 120°
- バッテリー
- 充電器 (USB ケーブル付)
- AC アダプター
- 防護メガネ
- 取扱説明書
- 保証書・保証規定




緑：健全歯



赤：う蝕部位



本体 1 年保証

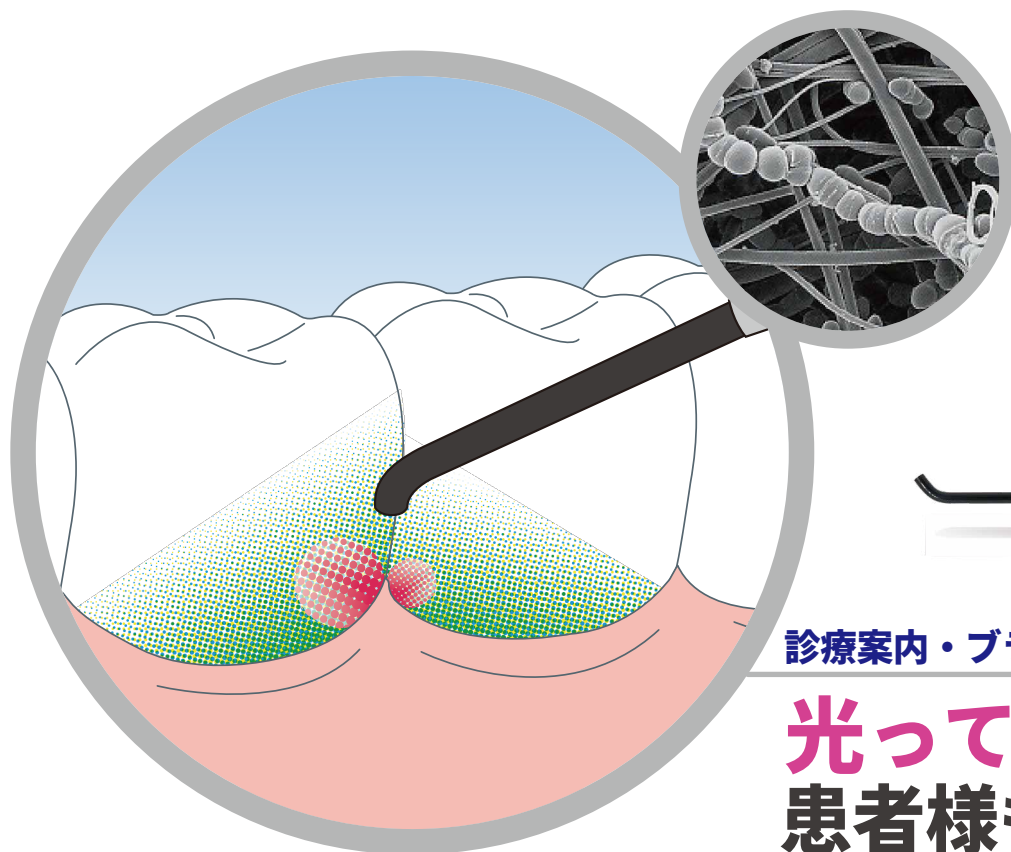


診療案内・ブラッシング指導に新提案

光って見えるから 患者様も安心・納得

説明しづらい虫歯や磨き残しを赤く光ってお知らせするからスムーズなご案内が可能になります。そのため面倒な歯垢染色剤や、う蝕検知液のかわりに手軽にお使いいただけます。患者様への案内や治療の確認にマルチに活躍する 1 台です。

面倒な準備なしで細菌を可視化

本機より発せられる約 400nm の波長の光により健全な歯質は緑色に、う蝕部位や歯石・歯垢といった細菌が密になっている部位は赤色に光ります。

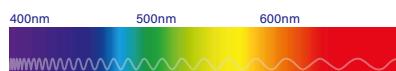


安心の

メーカー保証

本体に限りご購入日より 1 年間の保証を致します。

発売記念キャンペーン
ご成約
先着 **300** 台限定
防護メガネ +1 個
プレゼント

患者様といっしょに使える

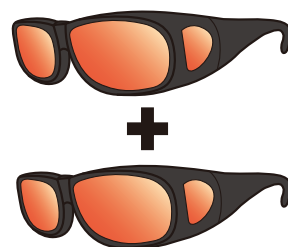

製品概要

機械器具 02 医療用照明器 一般医療機器 汎用歯科用照明器 (12351000) 届出番号: 40B1X10014000008

寸 法	長さ: 182 mm (ライトガイドロッド装着時) 幅: 15.0 mm (最大径)
質 量	84.7 g (ライトガイドロッドおよびバッテリーを含む)
作動電圧	DC 3.7 V
光 源	LED (class 1 LED 製品)
波 長 域	約 400 nm

バッテリー	リチウムイオン電池
充電時間	約 1.5 時間 (フル充電時)
電 源	AC 100~240 V (50/60 Hz)
同梱書類	日本語取扱説明書 クイックスタートガイド