遠赤外線寒天コンディショナー
2ステージフルオートタイプ

JDS遠赤ウォーマー
カートリッジタイプ



Pカートリッジ
シリンジ付



Pカートリッジシリンジ
一般的名称：歯科用注入器具
医療機器分類　一般医療機器
届出番号：11B2X00019CL1003

JDS遠赤ウォーマー

遠赤外線の電磁波がムラのない
理想的な加熱を寒天に与えます。
また物性劣化を最小に抑えます。

マイコン制御により、
高精度に温度をコントロールします。
保存温度55℃～70℃、
溶解時間1分～30分の間で変更可能

ボタンをOFFにしている時も予約
タイマー時間・溶解保持時間・保
存温度等をメモリーしています。
※元電源を落とした場合は、保存温度のみ保持されます。

最大60時間の
予約タイマー機能により、
待つことなくご使用できます。

Pカートリッジシリンジ

耐久性に優れ、
オートクレーブに
ラクラク対応します。

JDS遠赤ウォーマー仕様　（8本フルオート×2ステージ）

寸　法	W120×D150×H95㎜	重　量	約1.5kg
電　圧	AC 100V	周波数	50 / 60Hz

JDS遠赤ウォーマー
カートリッジタイプ



(8本フルオート×2ステージ)



JDS遠赤ウォーマー本体

プラス

Pカートリッジシリンジ付

価格：103,000円


- 各ステージ(寒天槽)専用のデジタル表示があり、使用状況が一目瞭然。
- 操作パネルも各ステージ専用にあり、隣の槽を誤操作してしまうことがありません。
- 遠赤外線の電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また、物性劣化を最小に抑えます。
- マイコン制御により、精度の高い温度コントロールを実現しています。
  保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能。
- 最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。


一般的名称：一般医療機器
医療機器分類　歯科材料加温器
届出番号：11B2X00019JDS001

価格：96,400円（Pカートリッジシリンジ無し）

かんたん操作

※詳しくは使用説明書をご覧ください。

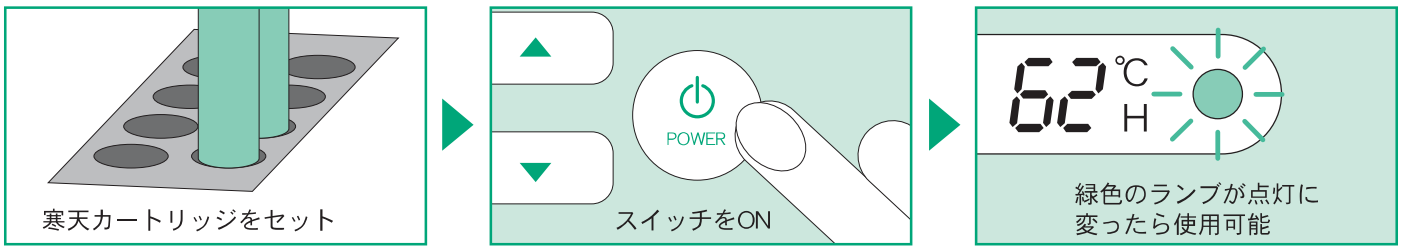

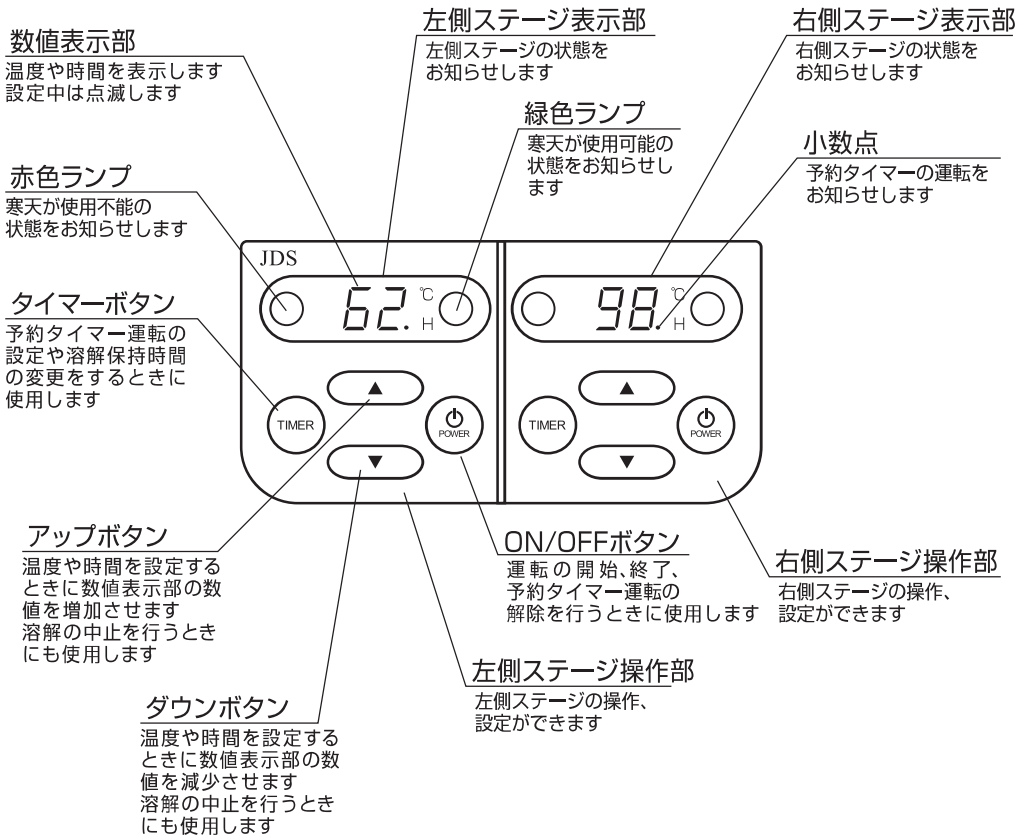

メンテナンス

販売店やメーカーに依頼しなくても寒天槽を清掃できます。

①電源プラグをコンセントから抜き、本器を充分に冷ましてください。
②プラスドライバーでガイドカバーの止めネジを取外してください。
③ガイドカバーを取外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った雑巾で拭いてください。
④寒天カートリッジ挿入口内の清掃は、割り箸等挿入口内壁を傷つけない材質の棒状のもので、乾燥した寒天または異物をこすり落として下さい。
⑤元通りに組立ててください。

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。

http://www.dentalsupply.co.jp/

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれません）。

販売元
株式会社 日本歯科商社
東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5　TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9　TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18　TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288
製造販売元　株式会社クラーク

ご用命は

1026TN0200