

# CREATION MAGIC COLOUR ASSORTMENT

## マジックカラープロフェッショナルキット

このキットには、ステイン、グレイス、リキッドの全種類が含まれています。



| Dentine Shade |                   |    |
|---------------|-------------------|----|
| 1             | DS-A              | 3g |
| 1             | DS-B              | 3g |
| 1             | DS-C              | 3g |
| 1             | DS-D              | 3g |
| Highlight     |                   |    |
| 1             | HL-1 white        | 3g |
| 1             | HL-2 eggshell     | 3g |
| 1             | HL-3 lemon yellow | 3g |
| 1             | HL-4 mandarine    | 3g |
| 1             | HL-5 flamingo     | 3g |
| 1             | HL-6 apricot      | 3g |
| 1             | HL-7 light brown  | 3g |
| 1             | HL-8 medium brown | 3g |
| 1             | HL-9 olive        | 3g |
| 1             | HL-10 red         | 3g |
| 1             | HL-11 dove blue   | 3g |
| 1             | HL-12 grey        | 3g |
| 1             | HL-13 deep blue   | 3g |
| 1             | HL-14 fissure     | 3g |
| 1             | HL-15 illusion    | 3g |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ネオ ステイン              |           |
| マジックカラープロフェッショナルキット  | ¥ 260,000 |
| マジックカラースターターキット ZI-F | ¥ 130,000 |

## マジックカラースターターキット ZI-F

このキットには最も一般的なステイン、グレーズ、リキッドのほか、ジルコニア補綴物をマイクロレイヤーするためのZ IーF 陶材2種類が含まれています。



| Dentine Shade |                         |      |
|---------------|-------------------------|------|
| 1             | DS-A                    | 3g   |
| 1             | DS-B                    | 3g   |
| Highlight     |                         |      |
| 1             | HL-1 white              | 3g   |
| 1             | HL-4 mandarine          | 3g   |
| 1             | HL-6 apricot            | 3g   |
| 1             | HL-8 medium brown       | 3g   |
| 1             | HL-9 olive              | 3g   |
| 1             | HL-11 dove blue         | 3g   |
| Glaze         |                         |      |
| 1             | Glaze Fluo              | 3g   |
| 1             | Glaze                   | 3g   |
| Liquid        |                         |      |
| 1             | Liquid GL               | 25ml |
| 1             | Special Liquid ML       | 25ml |
| Brush         |                         |      |
| 1             | Brush IV                |      |
| Make In       |                         |      |
| 1             | MI-63 honey yellow      | 3g   |
| Ceramic       |                         |      |
| 1             | ZI-F Transpa NT neutral | 20g  |
| 1             | ZI-F Transpa OT         | 20g  |

|                 |    |            |                         |         |
|-----------------|----|------------|-------------------------|---------|
| マジックカラーデンチンシェード | 3g | 各 ¥ 11,000 | マジックカラーリキッドGL 25mL      | ¥ 3,900 |
| マジックカラーハイライト    | 3g | 各 ¥ 11,000 | マジックカラーリキッドGL 50mL      | ¥ 7,000 |
| マジックカラーメイクイン    | 3g | 各 ¥ 11,000 | マジックカラースペシャルリキッドML 25mL | ¥ 5,000 |
| マジックカラージンジバシェード | 3g | 各 ¥ 11,000 | マジックカラースペシャルリキッドML 50m  | ¥ 8,500 |
| マジックカラーグレーズ     | 3g | 各 ¥ 11,000 |                         |         |

一般の名称： 歯科セラミックス用着色材料  
医療機器分類： 管理医療機器  
医療機器認証番号： 226AFBZX00024000

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

詳しい資料はHPから



ジーシーグループ [ 製造販売元 ]



## 株式会社 日本歯科商社

東京 本 社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪 支 店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州 営 業 所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元： クレマ社 （オーストリア共和国）

ご用命は

## Creation Magic Colour

Where technology ends, craftsmanship begins

WILLI GELLER  
Creation





# A COLOUR SYSTEM ...

●テクニシャンの為に開発された

モノリシックレストレーションのデジタル作業は効率的であり 確固たる結果をもたらせます。マジックカラーはユーザーの 審美的要求に応えるために開発されました。このコンパクトなカラーシステムは革新的な製造プロセス、個々の技工テクニック、専門知識と融合します。

●ハイエンドな審美性

マジックカラーはモノリシックジルコニア、ニケイ酸リチウムの 補綴物のアクセントと表面ステインに使用されます。パウダーとリキッドの組み合わせにより多くのプロセッシングオプションを提供し、操作も非常に容易になっています。マジックカラーGLとミックスし微粒なカラーパウダーはペースト状の状態で薄い層でも大変審美的な効果を発揮します。

●より輝きを、より自然な深みを

表面バーニッシュ、カラーキャラクタライズ、マイクロレイヤー との組み合わせのいずれも使用できます。マジックカラーは多様な審美の為の出発点となります。クリエイションZI-Fを使用したマイクロレイヤー は特に前歯補綴物に於いて審美性、深い輝きの効果を向上させ ます。マジックカラーは あらゆる補綴物にそれぞれの製作者の技術を表現します。

●マジックカラーの主な特徴

- ・粉末タイプによる多様な稠度調整
- ・CAD、プレス、築盛セラミック、ジルコニア、ニケイ酸リチウム補綴物の表面キャラクタライゼーション
- ・築層セラミックスの着色
- ・表面ステインとマイクロレイヤリングの併用
- ・超微粒子パウダーの蛍光性による自然的光学効果

マジックカラーシステムは白と赤の審美に必要なすべての色調を揃えています。粉、液タイプのコンセプトによりステインの稠度は必要に応じて調整でき、色調の強さもコントロール可能です。ステインは白及び染色されたフレームワークを効果的にカバーしマイクロレイヤーの下地として機能します。マジックカラーはモノリシックレストレーションの製作において大きな自由度を提供し、色調表現が容易です。



Stefan Picha – Oral Design



マジックカラーはモノリシックレストレーションの製作に新しい選択肢を与えてくれました。ステインは均一に塗布することができ、非常に薄い層でもクリアで完全な自然の色調表現を得る事ができます。マジックカラーは焼成安定性が非常に高く、表面の均一性には目を見張るものがあります。マイクロレイヤーは、より良い審美性を達成するために役立ちます。わずか2回の焼成で審美を得る事が可能となり審美回復の技工効率を大幅に向上させました。

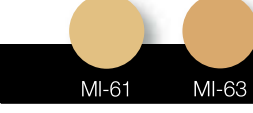


Alexander Conzmann – Oral Design



# CREATION MAGIC COLOUR SYSTEM

クリエイションマジックカラーはモノリシック補綴物に個別の特徴を表現するシステムです。

| システム構成                                                                                                                                            | 適用分野                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Magic Colour – Dentine Shade</b><br><br>DS-A DS-B DS-C DS-D | VITAシェードA-Dで構成                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Magic Colour – Glaze</b><br><br>Glaze Fluo Glaze            | 自然な光沢                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Magic Colour – Make In</b><br><br>MI-61 MI-63               | マメロンの表現                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Magic Colour – Gingiva Shade</b><br><br>GS-1 GS-2 GS-3     | 歯肉の自然な表現                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Magic Colour – Liquid</b><br><br>Liquid GL 25ml, 50ml     | 理想的なプロセス<br><br>マジックカラーリキッドGLは、ステイン技法専用開発されたステインとグレイズパウダーのための混合液です。マジックカラースペシャルリキッドMLは、Creation ZI-Fを用いたマイクロレイヤーのために専用に開発されたものです。緻密で均質なセラミックコンシステンシーを生成し、非常に薄い層での材料塗布を可能にします。収縮率が低く、密度が高いため、焼成後にセルフグレイズ効果を発揮します。 |
| <br>Special Liquid ML 25ml, 50ml                             |                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Magic Colour – Highlight</b><br><br>HL-1 HL-2 HL-3 HL-4 HL-5<br>HL-6 HL-7 HL-8 HL-9 HL-10<br>HL-11 HL-12 HL-13 HL-14 HL-15 | シェードキャラクタライズを自由に表現 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

