


ポーセレン焼成トレー メッシュトレー

Mesh-Tray

軽量でハチの巣状のため、自由な位置にクラウン、ブリッジをセット出来ます。

- ・付属の焼成ピンは好きな形状に曲げられます。
- ・熱吸収が少ないトレーです。
- ・トレーはカッティングジスクで分割ができます。

トレーサイズ 約53x53mm
 焼成ピンφ 1mm
 包装 メッシュトレー2個、焼成ピン曲型6本、直型4本
 注文No. 1922-0000
 価格 13,300円

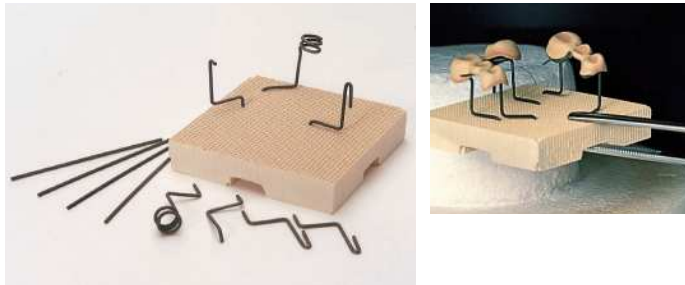

【別売】メッシュトレー用サポート 10入
 包装 焼成ピン10本(曲型6本、直型4本)
 注文No. 91922-0001 価格 5,300円

【別売】メッシュトレー用サポート 20入
 包装 焼成ピン 直型20本
 注文No. 91922-0003 価格 9,200円

ワックスナイフ ERGO ワックスインスツルメント

ERGO Wax Instrument

軽量で操作が容易なワックスナイフです。ハンドル部は耐熱性で、熱遮断性があります。

	注文No.	価格
ERGOワックスインスツルメントNo. 1、1本	1034-2001	6,300円
ERGOワックスインスツルメントNo. 2、1本	1034-2002	6,300円
ERGOワックスインスツルメントNo. 3、1本	1034-2003	6,300円
ERGOワックスインスツルメントNo. 4、1本	1034-2004	6,300円
ERGOワックスインスツルメントNo. 5、1本	1034-2005	6,300円



一般の名称：歯科技工用形成器具 医療機器分類：一般医療機器
 届出番号：13B2X101030220


ポーセレン焼成トレー メッシュトレーK

Mesh-Tray K

ポーセレン焼成ピン付のセットです。

- ・熱膨張係数、収縮係数が類似しているためオールセラミックの焼成に適しています。
- ・前歯、小臼歯、大臼歯に合ったサイズの焼成ピンがあります。
- ・ハチの巣状のため正確にピンを立てることができます。

トレーサイズ 約53x53mm
 ポーセレン焼成ピン 大φ4mm、中φ3mm、小φ2mm、全長20mm(セット時15mm)
 包装 メッシュトレー2個、ポーセレン焼成ピン大3本、中4本、小3本
 注文No. 1922-0100
 価格 24,500円

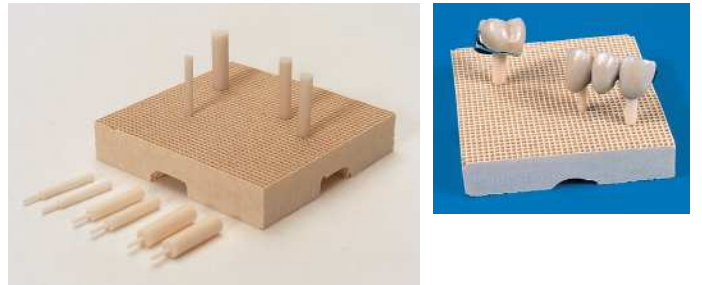

【別売】メッシュトレーK用サポート
 包装 ポーセレン焼成ピン10本(大3本、中4本、小3本)
 注文No. 91922-0002 価格 18,600円

アクティブカーボン

Aktiv-Karbon

アクティブカーボンは、非貴金属の焼成や後ロー着時にファーンエスの炉内で発生する金属酸化物を吸収します。

カーボンの高い吸着力により、炉内の金属酸化物の残留を防ぎクリーンな状態に保ちます。

●使用方法

トレーに焼成ピンを立てて、アクティブカーボンをセットします。
 陶材焼成と同じプログラムでアクティブカーボンを焼成してください。

サイズ 10x10x25mm
 包装 アクティブカーボン10個、焼成ピン2本
 注文No. 2065-0000
 価格 20,000円



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は