

【価格】



Aoral スキャン Elite 2,700,000 円  
Aoral スキャン Elite ワイヤレス 3,150,000 円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要があります。  
※メーカー保証3年付き

スキャナーチップ ビッグ/スタンダード/ミニ 各 9,000 円  
(本体にビッグ×2、スタンダード×3、ミニ×1が同梱)

◆ 延長保証 5 年間 各 200,000 円  
(メーカー保証 3 年+延長 2 年 ※設置日より 5 年間)

主な対象品:カメラモジュール、プロジェクターモジュール、キャリブレーション  
ボード、3.0USBケーブル等

※消耗品 (スキャナーチップ等) や不適切な使用に起因する故障は対象外となります。  
詳細はお問い合わせください。  
※保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理を何度でも受けられます。  
※エンドユーザー購入時のみ加入可能です。(5 年延長保証終了後の再加入はなし)  
※IPG スキャンボディキットは延長保証の対象外です。

Aoral スキャン Elite (デジタル印象採得装置) 管理医療機器  
承認番号: 30700B2I00017000 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ



G-Oral スキャン 2 1,900,000 円  
G-Oral スキャン 2 ワイヤレス 2,450,000 円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要があります。

スキャナーチップ スタンダード/ミニ 各 9,000 円  
(本体にスタンダード×4、ミニ×1が同梱)

◆ 保守維持費用 5 年パック 各 250,000 円  
(※設置日より 5 年間)

主な対象品:カメラモジュール、プロジェクターモジュール、キャリブレーション  
ボード、3.0USBケーブル、ACアダプター等

※消耗品 (スキャナーチップ等) や不適切な使用に起因する故障は対象外となります。  
詳細はお問い合わせください。  
※保守維持費用 5 年パック必須  
※保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理を何度でも受けられます。

G-oral スキャン 2 (デジタル印象採得装置) 管理医療機器  
承認番号: 30400B2I00006A01 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ



MetiSmile 1,190,000 円  
MetiSmile-MR 1,590,000 円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。  
別途購入の必要があります。  
※メーカー保証 1 年付き

MetiSmile (頭部顔面規格写真撮影装置) 一般医療機器  
届出番号: 13B1X10100000116  
製造販売元: コアフロント株式会社

【関連製品】



Aoral スキャン Elite 各 380,000 円  
IPGコードスキャンボディ A〜Fキット

IPGコードスキャンボディキットは、各イン  
プラントシステムのマルチユニットアパッ  
メントに締結して使用するスキャンボディで  
す。インプラントシステムによってA〜Fまで  
6種類のキットを用意しています。

【対応インプラントシステム】  
Aキット: ノーベルバイオケア・ストローマン・  
オステム ほか 数10社  
B〜Fキットの詳細はお問合せください。

Shining 3D IPG コードスキャンボディ (歯科インプラント補綴用  
器具) 一般医療機器 届出番号: 40B1X10003GE0193 / 製造販  
売元: 株式会社ジオメディ



vhf ミリングマシン  
E4 4,500,000 円

E4は、外部コンプレッサー不要で設置場所を  
選ばない、超コンパクト設計のブロック専用  
ミリングマシンです。特許出願中の新技術  
AIRTOOLを搭載し、高品質なウェット加工と  
ドライ加工の両方を実現します。

【対応マテリアル】  
標準 (ウェット): ガラスセラミックス・ハイブ  
リッドレジン ほか  
ドライ加工 (オプション) の詳細はお問合せください。

vhf ミリングマシン E シリーズ (歯科技工室設置型コンピュータ  
支援設計・製造ユニット) 一般医療機器 届出番号:  
13B1X10100000117 / 製造販売元: コアフロント株式会社



rapidshape 3Dプリンター  
PRO20 2,800,000 円

PRO20は、高速・高精度なDLP方式の3Dプ  
リンターです。独自の「フォースフィードバッ  
ク技術」により、圧倒的なスピードで安定して  
造形します。オープンシステムを採用しており、  
様々な歯科用レジンに対応可能です。

【対応インプラントシステム】  
サージカルガイド、歯科用モデル、スプリ  
ント、個人トレー、仮歯 ほか

rapidshape 3D プリンター プラスシリーズ (歯科技工室設置型  
コンピュータ支援設計・製造ユニット) 一般医療機器 届出番号:  
13B1X10100000083 / 製造販売元: 株式会社日本歯科商社

※ 価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※ 本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



販売元:

株式会社 日本歯科商社 www.dentalsupply.co.jp

東 京 本 社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大 阪 支 店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九 州 営 業 所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元:

COREFRONT コアフロント株式会社

(Metiスマイル3Dフェイススキャナー/ vhf E4 ミリングマシン/ rapidshape PRO20)

株式会社ジオメディ

(G-Oralスキャン 2/ワイヤレス・AoralスキャンElite/ワイヤレス  
/IPGコードスキャンボディ)

2026年5月版 製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。記載内容は2026年5月現在のものです。


ご用命は

顔貌・咬合・顎運動を多角的に捉える、  
デジタルを活用した歯科診療

SHINING 3D  
DENTAL



FACE SCANNER  
IOS

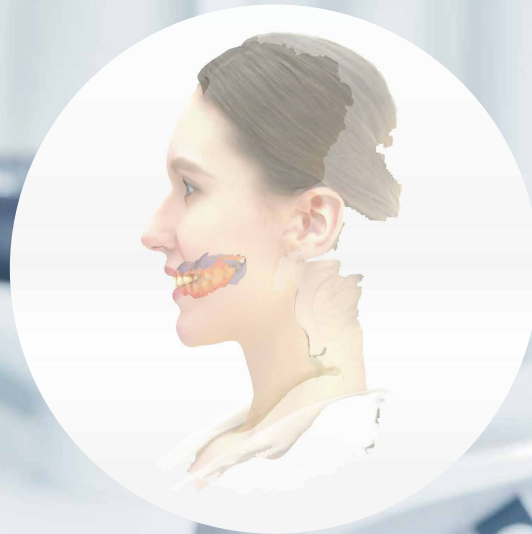

COREFRONT  
www.corefront.com

# 口腔内スキャナー

- 01 臨床ワークフローや用途に最適な構成をお選びいただける**充実のラインナップ**
- 02 各プロセスにおいて**高度なソフトウェアインテリジェンス**を体感
- 03 クラウド接続により、クリニックと技工所間での**シームレスなデータ共有を実現**

## G-OralScan 2 シリーズ



- 速い・簡単・失敗しにくい

初めてでもスムーズに高品質データを取得
- 余計な部分は自動で除去

AIが不要データをカットし、きれいなスキャンに
- デジタル活用の第一歩に最適

3Dプリンターや矯正シミュレーションにも対応

## Aoralscan Elite シリーズ



- インプラントまで1台で対応

スキャン＋位置計測を同時に行えるオールインワン
- 複雑な症例でも、ズレにくい

All-on-Xなど高精度が求められる症例をサポート
- 軽くて疲れにくい

長時間でも手首に負担をかけにくい設計

| 機種名        | G-OralScan 2          | G-OralScan 2 Wireless | Aoralscan Elite             | Aoralscan Elite Wireless    |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 接続方式       | 有線 (USB 3.0)          | ワイヤレス (Wi-Fi 6)       | 有線 (Type-C)                 | ワイヤレス (Wi-Fi 6)             |
| スキャン原理     | 構造化光                  | 構造化光                  | 構造化光＋フォトグラメトリー (IPG)        | 構造化光＋フォトグラメトリー (IPG)        |
| 重量 (チップ含む) | 約 240g                | 約 330g (バッテリー込)       | 約 124g                      | 約 194g (バッテリー込)             |
| 本体寸法 (mm)  | 281 × 33 × 46         | 270 × 50 × 40         | 245 × 30 × 26               | 247 × 38 × 37               |
| スキャナーチップ   | 2種類 (Standard / Mini) | 2種類 (Standard / Mini) | 3種類 (Big / Standard / Mini) | 3種類 (Big / Standard / Mini) |
| スキャン精度     | -                     | -                     | 5μm (超高精細)                  | 5μm (超高精細)                  |
| スキャン深度     | 22mm                  | 22mm                  | 22mm                        | 22mm                        |
| バッテリー性能    | -                     | 連続スキャン約2時間            |                             | 連続スキャン約2時間 (予備込2本付属)        |

製造販売元：株式会社ジオメディ

# フェイススキャナー

- 01 DICOMデータの**直接セグメンテーション**および**自動アライメント**に対応
- 02 複数形式のデータを共通の座標空間に統合し、**整合・解析が可能**
- 03 exocadソフトウェアとの高い互換性



MetiSmile-MR

下顎運動軌跡記録機能モジュール

患者の下顎運動を高精度に記録し、口腔内スキャンデータと統合することで、デジタル上での動的咬合接触の可視化が可能になります。これにより、早期接触の特定および除去が可能となり、長期的に安定した補綴治療の実現に貢献します。

MetiSmile-MR オプション

最適顎間関係確定機能モジュール

最適な顎間関係をスピーディーに特定することが可能です。有歯顎患者においては、咬合リハビリテーションを目的としたスプリントの作製を支援します。無歯顎症例では、確立された最適咬合位に基づき義歯製作をサポートし、治療ワークフロー全体の効率化に寄与します。

注意:本モジュールは、顎関節症(TMD)を有しない患者に適用されます。

MetiSmile／MetiSmile-MR オプション

下顎運動軌跡分析機能モジュール

顎頭および切歯点の各方向への運動を包括的に把握することが可能です。統合されたCBCTデータと連動することで、3D可視化を実現します。さらに、これらの運動を2次元平面へ投影することで、運動の協調性、咬合の対称性および安定性を高精度に評価できます。

| フェイススキャナー仕様一覧 |                                             | 推奨PCスペック        |                                   |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 機種名           | MetiSmile／MetiSmile-MR                      | CPU             | IntelL Core i7-8700及以上            |
| カメラ解像度        | データ収集カメラ:130万画素 / HDテクスチャーカメラ:500万画素        | メモリ             | 16 GB以上、32 GB推奨                   |
| 精度            | 50 μm                                       | HDD             | 256 GB SSD及以上                     |
| 視野            | 動作距離：500mm / FOV：210×270mm                  | 画面解像度           | 1920×1080、60 Hz及以上                |
| 出力形式          | STL, PLY, OBJ                               | 接続              | USB 3.0                           |
| 白LEDの色温度      | 5,500 K                                     | グラフィックカード (GPU) | NVIDIA RTX 2060 6GB及以上            |
| 本体サイズ、本体重量    | 215×50×75mm、800 g                           | OS              | Microsoft Windows 10(64-bit)      |
| 電源            | 入力：AC100-220V、50/60 HZ 1.5A / 出力：DC12V、7.0V |                 | またはそれ以降のバージョンのWindowsオペレーティングシステム |

製造販売元：コアフロント株式会社