


表面反射率97.4%(メーカー公表値)

# フロントサーフェイスミラー

- 表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。
- 特殊なロジウムコーティングを施しているため、直視に近い明るい反射像が得られます。
- カメラ撮影でも、視野が明るいいため、鮮明な画像が得られます。
- 通常のミラーと比較して、反射像が二重にならないので、目にかかる負担が軽減されます。

FRONT SURFACE MIRROR

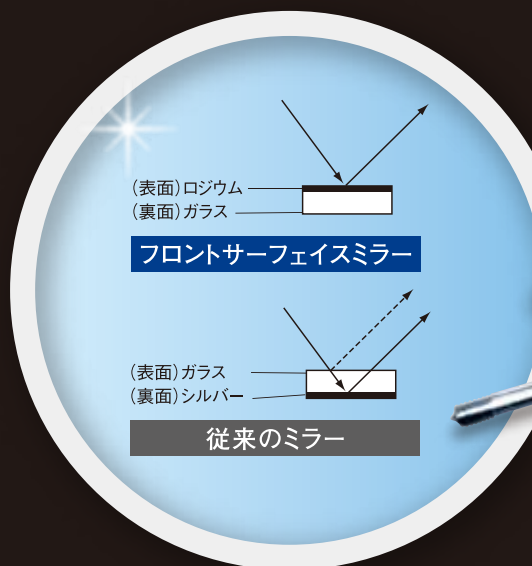

一般的名称: 歯鏡  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104110268  
製造元: ローダー社(ドイツ)



## チークリトラクター

- 口角を2点で支える事により、長時間の診療でも、患者さんの痛みが軽減されます。
- 光の入る量が増えますので、術野の視野の明るさが確保されます。

別売品

**フロントサーフェイスミラーハンドルPD-1**

全長 125mm


手に馴染みやすい設計で、診療精度をサポート

- 繊細な操作を可能にするグリップ設計で、長時間の使用でも快適な操作性を実現。
- 歯科医師・歯科衛生士の手にフィットする、プロフェッショナル仕様のハンドル。

種類	包装・価格	サイズ
#000	6枚入 19,900円	10mm
#0	6枚入 9,400円	14mm
#4	12枚入 9,400円	22mm
#5	12枚入 8,500円	24mm
チークリトラクター#4	6枚入 21,000円	22mm
チークリトラクター#5	6枚入 21,000円	24mm
ハンドルPD-1	1本入 7,000円	全長125mm

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

[原寸大サイズイメージ]

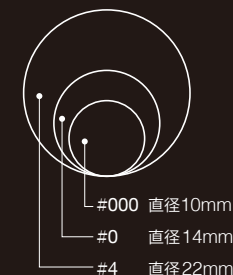

### 使用上の注意

鏡面にはロジウムコーティングが施されていますので、探針やスケーラー等の先端が鋭利なインスツルメントが触れない状態で消毒・滅菌を行ってください。  
※ご使用前にオートクレーブ(湿熱)滅菌(132°/12分)をおこなってください。

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は