

Specifications

仕 様

	EVEREST			RAZOR			
							
	UVS	AT	PT	800	1100	1300	CAP
直 径	98mm			98mm			
厚 み	12mm、14mm 16mm、18mm 20mm、22mm 25mm、30mm	12mm、14mm、16mm、18mm、20mm 22mm、25mm		12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm			
シェード	A1、A2、A3、A3.5 BL1、BL3 B1、B2 C1、C2 D2	A1、A2、A3、A3.5、A4 BL0、BL1、BL2、BL3 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4 D2、D3、D4		A1、A2、A3 B1、B2	A0、A1、A2、A3 A3.5、A4 BL1、BL2、BL3 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4 D2、D3、D4	A0、A1、A2、A3 A3.5 B1、B2 C1、C2 D2	A0 (WHITE)

Price list

価格表

■ EVEREST UVS		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥16,000	
14mm	¥19,000	
16mm	¥22,000	
18mm	¥25,000	
20mm	¥28,000	
22mm	¥31,000	
25mm	¥33,000	
30mm	¥36,000	

■ EVEREST AT / PT		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥16,000	
14mm	¥19,000	
16mm	¥22,000	
18mm	¥25,000	
20mm	¥28,000	
22mm	¥31,000	
25mm	¥33,000	

■ RAZOR 800 / 1100 / 1300		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥14,200	
14mm	¥16,900	
16mm	¥19,500	
18mm	¥22,000	
20mm	¥24,500	
22mm	¥27,000	
25mm	¥30,000	

■ RAZOR CAP		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥15,000	
14mm	¥16,000	
16mm	¥17,000	
18mm	¥18,000	
20mm	¥19,000	
22mm	¥20,000	
25mm	¥22,000	

■ ZIR GUIDE	
価 格	¥16,000

■ COLORING LIQUID		容 量	価 格
Natural(ナチュラル)	A1、A2、A3、A3.5、A4	50ml	¥6,500
Effect(エフェクト)	Incisal(インサイザル)、Blue(ブルー)、Violet(バイオレット)、Gray(グレイ) Brown(ブラウン)、Orange(オレンジ)、White(ホワイト)、Opaque(オパーク)	30ml	¥7,000

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY

〔販売元〕

株式会社 日本歯科商社

東京 本 社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大 阪 支 店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州 営 業 所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

〔選任製造販売業者〕株式会社ダブリューエスエム

ご用命は

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



0722SK0100

U&C ジルコニア

色調再現、安定性に優れた
ジルコニアディスク







歯科切削加工用セラミックス
U&C ジルコニア



高い審美性と安定性を誇る
ジルコニア。

12mm～30mmの厚みと豊富なシェード*で
様々な症例に適応。



※サイズとシェードの詳細は裏面をご覧ください。

販売名:U&CジルコニアBlock 一般的名称:歯科切削加工用セラミックス
管理医療機器 医療機器製販売認証番号:307AHBZI00037000





マルチレイヤー

最新4層グラデーション技術で切端の透明感と歯頸部の不透明性を再現したジルコニア。
独自の成型技術で収縮歪みを最小限に抑え、スピード焼成でも色調が安定します。
単冠からフルアーチまで症例に合わせた選択が可能です。

EVEREST UVS

シリーズ最高となる透過率グラデーション(切端49%～歯頸45%)を誇るジルコニア。
スピード焼成対応で、単冠約60分、約4時間の焼成を実現(6本ブリッジまで)。

推奨用途 単冠・臼歯・ブリッジ・フルアーチ

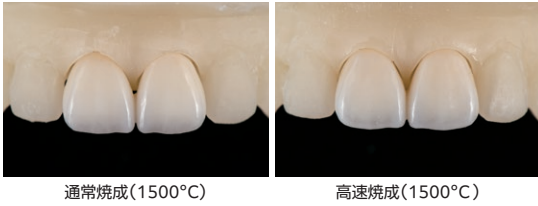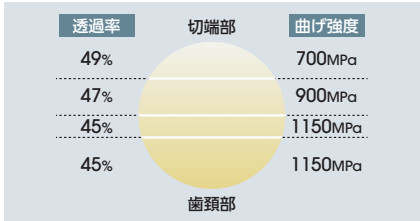

強度×高透過性

- 強度:700～1150MPa
- 透過性:45～49%

スピード焼成

- 最短約60分のスピード焼成(単冠)
- 即日補綴(ワンデー治療)に対応

安定した品質

- 通常焼成でもスピード焼成でも色調が変わらない

マルチレイヤーによる 自然な審美性

- 自然な色調と透明感を再現
- 透過性が高い上層幅を広く設計


オールラウンド対応

- 単冠・臼歯・ブリッジ・フルアーチ対応

EVEREST AT

前歯審美に特化した高透過性マルチレイヤー
ジルコニア。

推奨用途 ベニア・前歯クラウン・前歯ブリッジ

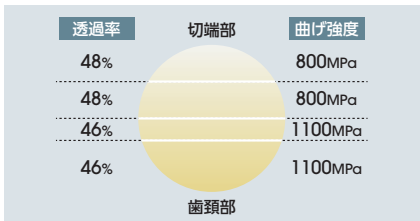


前歯に適した切端から
中間部まで高透過率
(上2層 48%)

EVEREST PT

高い強度を持つ臼歯・大型補綴向けマルチ
レイヤージルコニア。

推奨用途 臼歯クラウン・ブリッジ・フルアーチ

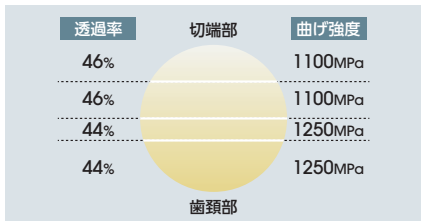

臼歯に適した高い曲げ
強度(中間部から下2層
1,250MPa)

RAZORTM
ZIRCONIA

シングルレイヤー

強度と透過率が異なる4タイプで、様々な症例に対応するジルコニア。
全19のVITAシェードに対応し、単一組成のため安定した物性が特徴です。
最適な補綴物製作を実現します。

	透過率	曲げ強度	特 徴	推奨用途
 RAZOR 800	48%	800MPa	前歯審美に特化した 高透明・単層ジルコニア	ベニア・前歯クラウン・ インレー・前歯ブリッジ
 RAZOR 1100	46%	1100MPa	前歯・臼歯どちらにも使える 高強度×高透過の 汎用ジルコニアディスク	クラウン・インレー・ コーピング・フルアーチ
 RAZOR 1300	44%	1300MPa	コーピングやブリッジ向けの 高強度ジルコニアディスク	臼歯クラウン・フルアーチなど 強度が必要な症例
 RAZOR CAP	35%	1400MPa	コーピング専用の ジルコニアディスク	単冠～フルアーチ・内面遮蔽 (変色歯・インプラント)

ZIR GUIDE

オリジナルガイドで、より精度の高い色調再現

実際のジルコニア素材で作られたシェードガイド。EVERESTシリーズと完全一致する色設計で、正確な色選択が可能。



シェードテイキング



装着後

COLORING LIQUID

ジルコニアに色を付けるためのユニバーサルカラーリング液。
支台歯の色抜けをおさえるオパークをラインナップ。
切端の透過をつよく出すための、ベース色に一色足すだけで、望みどおりの色に。

筆塗り法

ブラシを使って着色液を直接特定の箇所に塗布することで、
正確な色調整や自然なグラデーションの表現が可能です。

販売名:U&CカラーリングLiquid 歯科セラミック用着色材料
管理医療機器 医療機器製販売認証番号:307AHBZI00038000



Coloring Liquid		Application Guide
Natural(ナチュラル)	A1、A2、A3、A3.5、A4	デンティンシェード
Effect(エフェクト)	Incisal(インサイザル)	切端部の透明感を表現(切端部のベースとなる色調)
	Blue(ブルー)	切端部の透明感を表現(単色および混ぜて色調再現。Incisalの調整にも使用)
	Violet(バイオレット)	
	Gray(グレー)	
	Brown(ブラウン)	
	Orange(オレンジ)	歯根部や天然歯の変色・着色を表現
	White(ホワイト)	深い小窩裂溝の深みと色調を表現
	Opaque(オパーク)	ホワイトラインやハロー効果の表現
		カスタムアバットメントの下に使用し、内部の変色や金属アバットメントの色を遮断(マスキング)