

Products

【仕様】

モデル	有線モデル
製品名	Aoral スキャン Elf
スキャン範囲	ビッグチップ：19 × 14mm
	スタンダードチップ：16 × 12mm
	ミニチップ：12 × 9mm
スキャン深度	チップ先端面から 22mm
スキャン原理	構造化光と口腔内写真測量による非接触スキャナー
寸法	L245.5×W27×H30.5mm
重量	106g(チップおよびケーブルを除く)
出力形式	STL、OBJ、PLY
コネクションポート	Type-C

一般的名称：デジタル印象採得装置
一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類：管理医療機器
承認番号：30700BZ100017000

【価格】 Aoral スキャン Elf 2,200,000円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。

スキャナーチップ(Aoral スキャン Elf)

ビッグ / スタンダード / ミニ 各9,000円

(本体にビッグ×2、スタンダード×3、ミニ×1が同梱)

【パソコンのご用意】 一緒にご使用いただくためのパソコンが別途必要となります。

CPU	： Intel Core i7-12700 ～以降、Core i9シリーズ全て、
RAM	Intel Core Ultra7/9シリーズ全て ※表記以外は非対応
HDD	： 32GB ～
Graphic card (GPU)	： NVIDIA RTX 4060 [8GB以上]～ ※4050は非対応 NVIDIA RTX 5060～ ※5050は非対応
Resolution	： 1920×1080
I/Oポート	： USB Power Delivery (5V 3Aまたは15W以上の安定した給電必須) に対応した Type-C USB 3.0×1個 (本体接続用)、 Type-A USB 3.0×1個 (キャリブレーション用)
OS	： Windows 11 Home 64Bit ～

※インターネットの接続があれば、専用クラウド「Shining 3D Dental Cloud」を無償でお使いいただけます。
※上記以外のPCスペックをご使用の場合およびお客様で自身でPCをご用意いただく際は、使用可能かどうか事前に弊社にて確認させていただきます。

加入必須 Aoral スキャン Elf用 5年バック保守維持費 250,000円

<主な対象品>

- ・カメラモジュール ・プロジェクターモジュール
- ・キャリブレーションボード ・3.0 USBケーブル 等

※消耗品(スキャナーチップ等)や不適切な使用に起因する故障は対象外となります。詳細はお問合せください。
※保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理を何度でも受けられます。
※エンドユーザー購入時のみ加入可能です。(5年保証終了後の再加入はなし)

関連商品



Aoral スキャン Elite 2,700,000円
Aoral スキャン Elite ワイヤレス 3,150,000円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。
※メーカー保証3年付き

オプション 【延長保証5年間(メーカー保証3年+延長2年)】
200,000円(設置日より5年間)

<主な対象品>
・カメラモジュール ・プロジェクターモジュール
・キャリブレーションボード ・3.0 USBケーブル 等

一般的名称：デジタル印象採得装置
一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類：管理医療機器
承認番号：30700BZ100017000



コアフロントMetiスマイル 3Dフェイススキャナー 1,190,000円

コアフロントMetiスマイルーMR3Dフェイススキャナー 下顎運動記録モジュール付き 1,590,000円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。

一般的名称：頭部顔面規格写真撮影装置
医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B1X10100000116
製造販売元：コアフロント株式会社



G-oral スキャン2 1,900,000円
G-oral スキャン2 ワイヤレス 2,450,000円

※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。

加入必須 【保守維持費用 5年バック】 250,000円(設置日より5年間)

<主な対象品>
・カメラモジュール ・プロジェクターモジュール
・キャリブレーションボード ・3.0 USBケーブル 等

一般的名称：デジタル印象採得装置
一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類：管理医療機器
承認番号：30400BZ100006A01



JDS モバイルカート 60,000円

カートサイズ W465 × D421 × H650mm (最低位) ～ 900mm (最高位)
(伸縮ポール収納時) ※テーブル収納時・突起部・タブレットスタンド除く

サイドテーブル展開時 幅サイズ：573mm
フロントテーブル展開時 奥行サイズ：598mm

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



デモンストレーション 申込書		※必要事項を記入し、ご担当ディーラー様へお渡しください。	
ご希望機種	☐ Aoral スキャン Elf	☐ Aoral スキャン Elite	☐ G-oral スキャン2
	☐ Aoral スキャン Elite ワイヤレス	☐ Aoral スキャン Elite ワイヤレス	☐ G-oral スキャン2 ワイヤレス
お名前	住所 〒 -		
医院名	TEL	E-MAIL	
ご担当者名	デモンストレーションは、WEBからでもお申し込みいただけます。こちらからアクセス▶ 		
お取引先ディーラー名			

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

SHINING 3D
DENTAL

Smart Design. Simple Scanning.

The Aoralscan Elf intraoral scanner delivers a lightweight, precision-driven scanning experience that elevates clinical efficiency and comfort in modern digital dentistry.

スマートに、もっとシンプルに



口腔内スキャナー

Aoralscan Elf

エーオーラルスキャン エルフ



Ergonomic

ペンのように把持できる人間工学設計



Lightweight

わずか106g*の軽量ボディ

※チップおよびケーブルを除く



Functional

便利で効果的な機能を搭載

ジーシーグループ



【販売元】

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】

株式会社ジオメディ

ご用命は

Designed to Simplify Digital Dentistry.

デジタルデンティストリーをもっとシンプルに



エルゴノミックとユーザビリティを兼ね備えたiOS

負担を軽減する超軽量設計

106g*の軽量ボディで誰もが使いやすい設計を目指しました。

※チップおよびケーブルを除く



シンプルでスマートな接続性

Type-C ケーブル1本だけの接続設計。ケーブルが絡み合うことはありません。



幅広いケースに対応するチップ

ビッグチップ
フルアーチや複数本のスキャンに対応したサイズ

スタンダードチップ
一般成人に適したサイズ

ミニチップ
小児に適したサイズ




便利なデジタルツール

スキャン画像を二次元バーコード化し、スマートフォンで確認できる健康レポートをはじめ、患者さんの口腔変化を追跡するデータトラック、矯正シミュレーション機能などを搭載。

診療に有効



consuloS

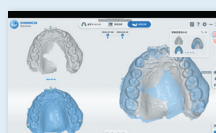

メトロントラック



健康レポート 二次元バーコード

スキャン動画を
ご覧いただけます



口腔衛生管理に有効なインテリジェント

積極的な口腔衛生管理で
予防歯科を推進！



ブラークスキャン&分析

全顎的なブラークスキャンを実施し、
歯面に対するブラーク付着面積比を算出。




ブラークモニタリングレポート

参考例はこちらからアクセス

※本機能はあくまで参考情報の提供を目的としており、
診査・診断には使用できません。

スマートレポート比較機能

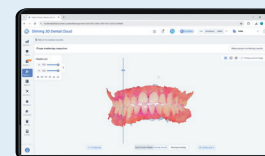


複数回来院時のデータを
比較し、数値的变化を可視化。
口腔衛生状態の推移を
客観的に評価。



モバイルレポート共有機能




患者向けに分かりやすいレポートを
自動生成し、スマートフォンへ共有可能。
ブラッシング指導や予防プログラムの
提案に活用。

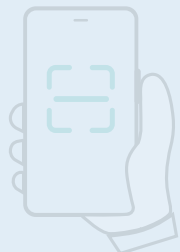


スマート咬合採得機能 IntelliBite

AIによる咬合解析と3Dインテリジェント補正で、咬合面を正確に把握し、適正な咬合採得をサポート。

Before

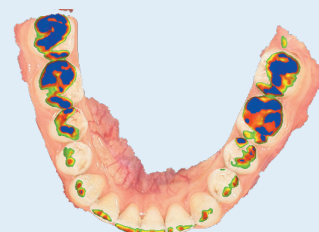


After

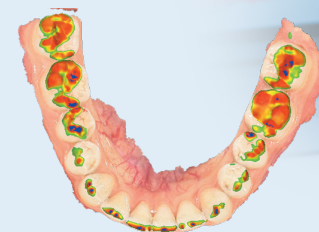


0.00mm
0.50mm
1.00mm

AIが咬合データを自動補正し、
実際の噛み合わせに近い咬合関係を再現

優れたスキャン性能

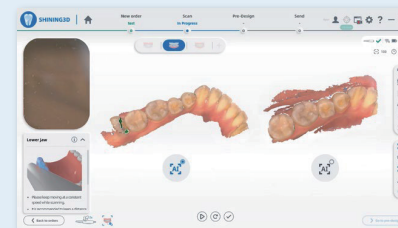


AIスキャンング

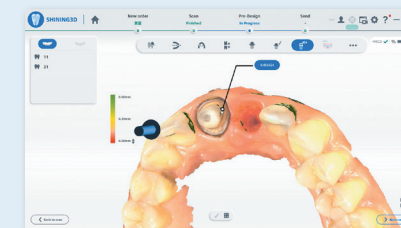


アンダーカットチェック




モーションセンシング

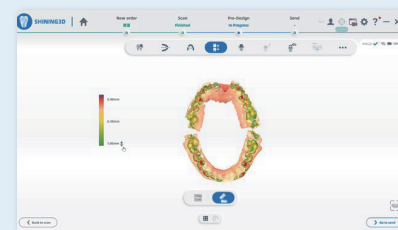

バイト分析

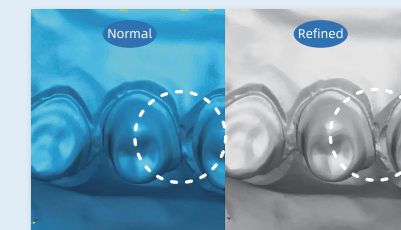

リファインスキャン

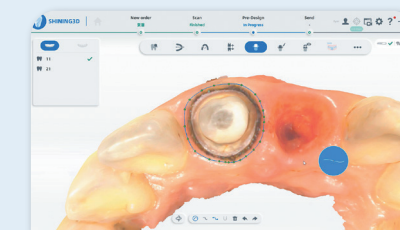

マージンライン自動抽出